

VistaScan Mini Easy 2.0

vstupte do budoucnosti





Připraveno pro stomatologickou praxi 2.0


Nový model VistaScan Mini Easy 2.0 se vyznačuje kromě inovativního designu i špičkovou technologií. Pracuje s nejnovější technologií paměťových fólií VistaScan IQ umožňuje mnoho nových funkcí umělé inteligence. Společně s vynikající kvalitou obrazu osvědčené technologie PCS tak bude vaše zubní ordinace dobře vybavena i do budoucna.

Na tom záleží:

- Technologie PCS pro vynikající kvalitu obrazu
- Koncepce Easy Feed pro formáty 0 a S2; formáty S1, S3 a S4 volitelně
- Hygienický skleněný displej s vysokým rozlišením
- Komplexní balíček inteligentních automatizačních funkcí v kombinaci s paměťovými fóliemi VistaScan IQ a VistaSoft AI

Kvalita a efektivita vyžadují inteligentní funkce

Pro využití maxima svého potenciálu pracuje zařízení VistaScan Mini Easy 2.0 výhradně s paměťovými fóliemi VistaScan IQ. V této kombinaci nabízí nejen osvědčenou technologii a vynikající kvalitu snímku, ale také mnoho nových funkcí, které výrazně zvyšují uživatelské pohodlí, efektivitu a bezpečnost práce.

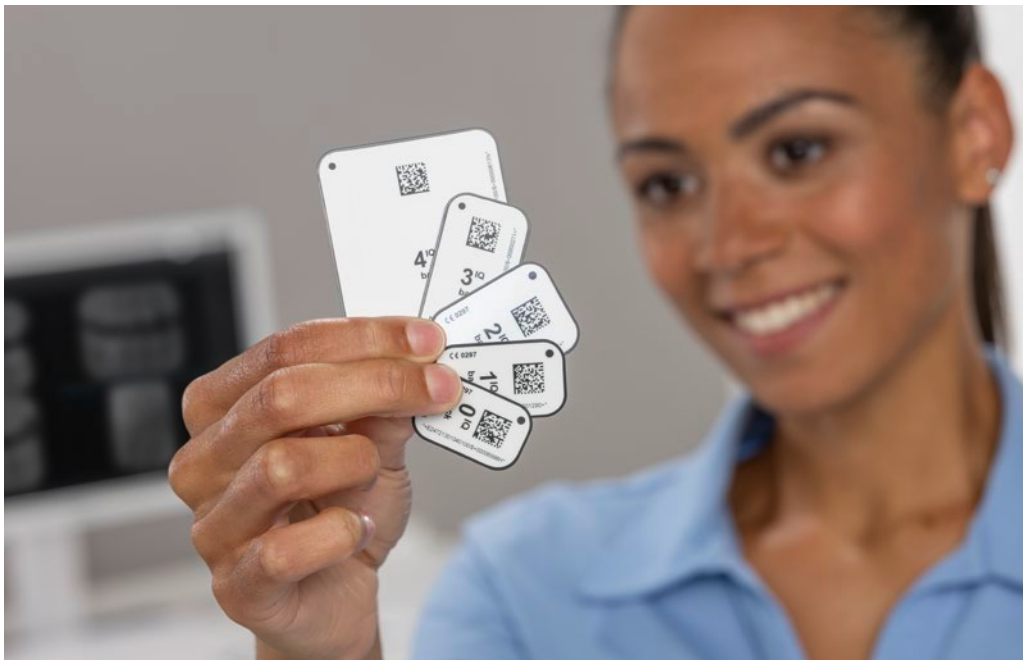

Udržitelnost od počátku

Všechny naše skenery paměťových fólií se vyrábějí podle principů udržitelnosti s neutrální uhlíkovou stopou. Také v dalších oblastech své činnosti se společnost Dürer Dental zavázala k odpovědnému využívání zdrojů. Je pro nás důležité neustále zlepšovat energetickou účinnost všech našich výrobků a díky nenáročnosti na opravy a údržbu dosáhnout jejich mimořádně dlouhé životnosti. Dbáme také na to, aby vše bylo zabaleno bezpečně a ekologicky.

Jasně přednosti

Rychlé a snadné skenování

Díky koncepci Easy Feed lze paměťové fólie velmi rychle skenovat jednu za druhou. Zařízení VistaScan Mini Easy 2.0 umí načítat veškeré intraorální formáty paměťových fólií.



Nejdůležitější formáty

Dodávka obsahuje všechno, co budete potřebovat k načtení paměťové fólie IQ velikosti 0 a 2.




Skleněný displej

Barevný skleněný displej s vysokým rozlišením nabízí velmi komfortní uživatelské rozhraní.



Vynikající kvalita obrazu díky PCS

Zařízení VistaScan Mini Easy 2.0 dokáže díky technologii PCS spolehlivě zobrazit rané kazové léze nebo nejjemnější kostní struktury.

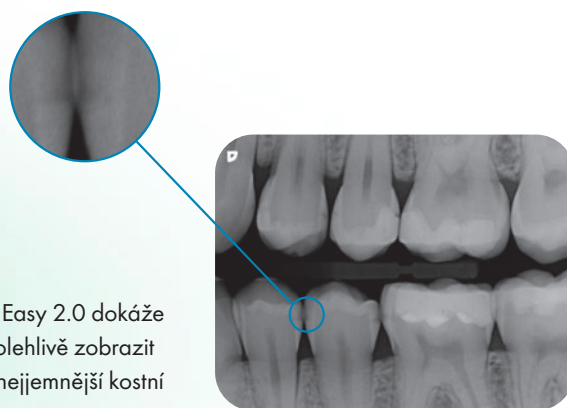


Snadné připojení

Pomocí rozhraní LAN lze zařízení VistaScan Mini Easy 2.0 snadno integrovat do sítě.

VistaSoft AI – inteligentní automatizace

S balíčkem VistaSoft získáte přístup k širokému spektru funkcí umělé inteligence, které zautomatizují vaši každodenní práci v ordinaci a výrazně ji zefektivní.

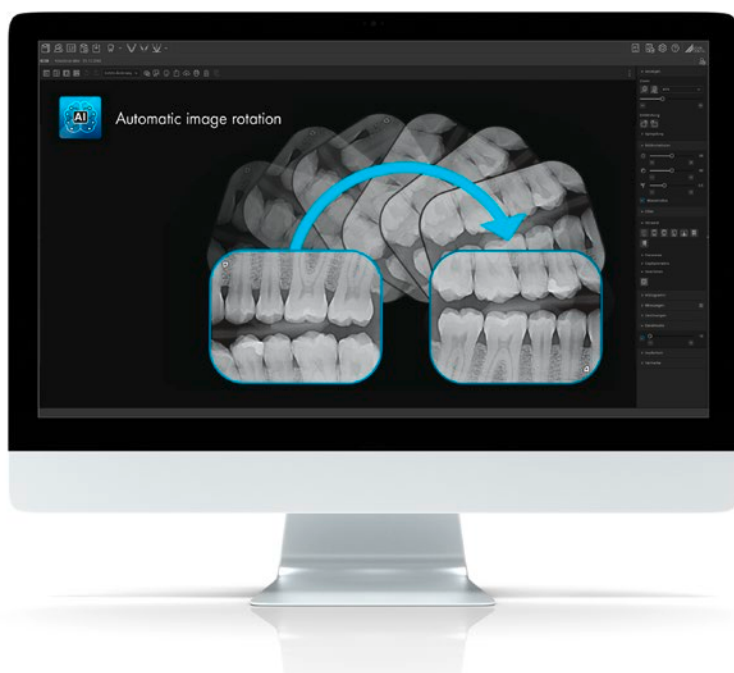

Automatická rotace obrazu

Algoritmus založený na umělé inteligenci VistaSoft kontroluje na základě zobrazené anatomie orientaci intraorálních rentgenových snímků a v případě potřeby automaticky opraví rotaci snímku. To vám ušetří cenný pracovní čas.




Videoklip

Automatická kontrola kvality paměťové fólie

V kombinaci se systémem paměťových fólií VistaScan IQ provádí VistaSoft AI automatizovanou kontrolu kvality paměťové fólie pro každý intraorální snímek. Tím je zajištěno zachování vynikající a trvalé kvality snímku.



Webové stránky

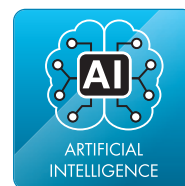


Detekce nesprávné strany expozice

VistaSoft AI automaticky detekuje potenciální špatnou stranu expozice paměťové fólie a odpovídajícím způsobem upozorní uživatele.



[Webové stránky](#)

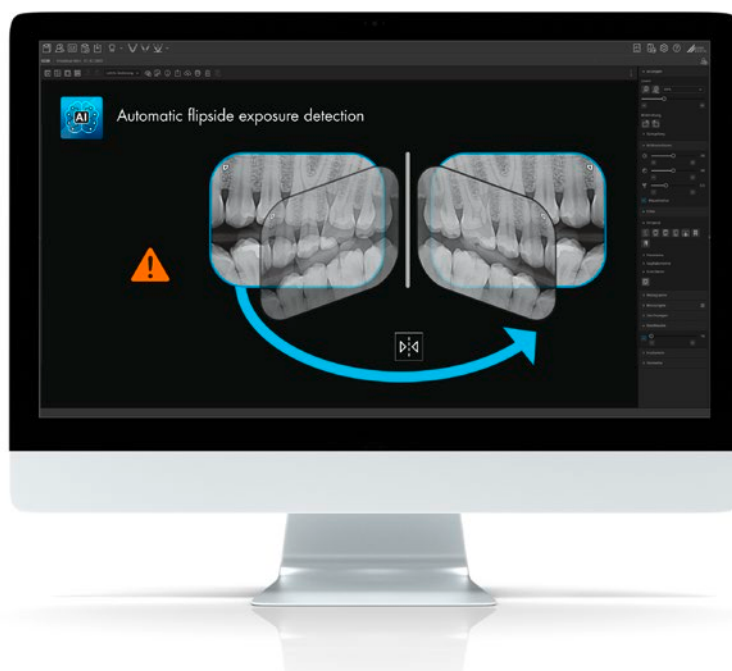


VistaSoft 3D

Součástí balíčku je plná licence na 2D a 3D rentgenové snímky pro VistaSoft, která umožňuje prohlížet 2D a 3D obrazová data a provádět diagnostiku – i bez vlastního specializovaného zařízení CBCT.



[Webové stránky](#)

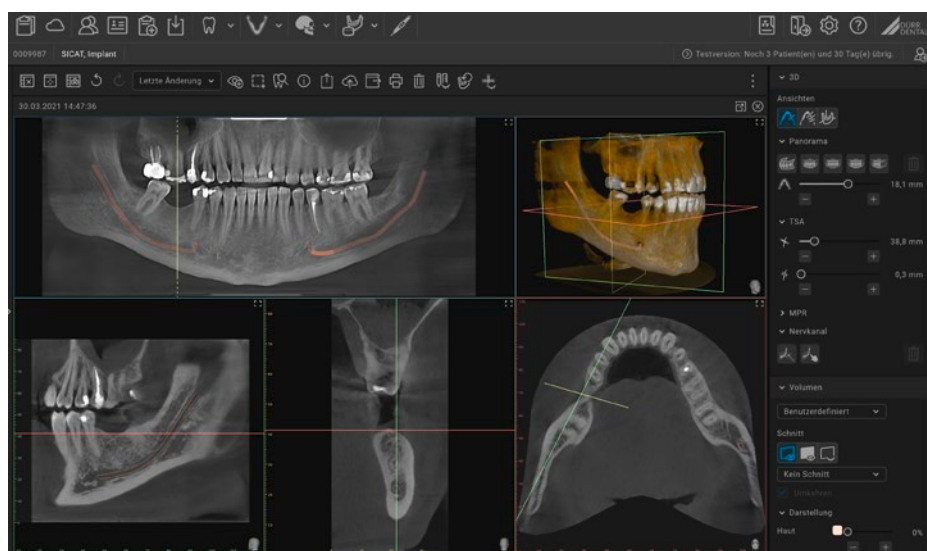

Technické parametry

Mini Easy 2.0	
Displej	2,4" barevný skleněný displej
Velikosti fólií	S0, S2; volitelné: S1, S3, S4
Teoretické rozlišení (lp/mm, dpi)	40 (2 000)
Efektivní rozlišení (lp/mm, dpi)	22 (1 100)
Stupnice šedé (bit)	16 (65 536)
Hmotnost (kg)	přibl. 5
Rozměry (v x š x h mm)	249 x 211 x 258
Funkce pohotovostního režimu	ano
Rozhraní	LAN



Systém držáků paměťových fólií

Díky hladkým zaobleným hranám nabízejí držáky paměťových fólií od společnosti Dürr Dental optimální ochranu paměťové fólie. Držáky jsou k dispozici pro všechny typy použití – pomáhají zajistit přesné rentgenové snímky.



Rentgen VistaIntra

Je dokonale přizpůsoben pro digitální zpracování s paměťovou fólií nebo snímačem. Lze použít i tradičním způsobem.



Ubrousek na čištění paměťových fólií

Znečištění na paměťových fóliích je na snímcích patrné a snižuje jejich životnost. Ubrousek na čištění paměťových fólií VistaScan umožní důkladné vyčištění paměťových fólií. Přednosti: dlouhá životnost, optimální kvalita obrazu.



DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Německo
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN